

TRS 200 XXL

TOILETTENROLLSTUHL / WHEELED DROP-ARM COMMODE

CE



Vorwort

Sehr geehrter/-e Benutzer/-in,

Wir gratulieren zum Kauf eines technisch ausgereiften und sich auf dem neuesten Stand der Technik befindlichen Produktes.

Diese Gebrauchsanweisung dient Ihnen und dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere, gefahrlose Nutzung des Toilettenrollstuhls und einer sinnvollen Nutzung der Produktmöglichkeiten.

Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes.

Diese Gebrauchsanweisung ist sorgsam durchzulesen und muss stets allen Nutzern des Produktes zugänglich sein.

Lieferumfang

1. Toilettenrollstuhl TRS 200 XXL
2. Eimer
3. Gebrauchsanweisung

Indikation

Toilettenrollstühle sind dann erforderlich, wenn das Benutzen oder Erreichen der Toilette aufgrund der Behinderung nicht möglich ist. Toilettenrollstühle sind auch als Zimmerrollstühle verwendbar. Toilettenrollstühle können über handelsübliche WC-Becken bis 41 cm Höhe geschoben werden.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam.

- Vor dem Gebrauch sind alle Bauteile auf Schäden und festen Sitz zu prüfen.

- Beim Hinsetzen, Aufstehen und beim Einschieben des Toiletteneimers sowie beim Hochklappen und Einrasten der Armlehnen können Bekleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden.
- Der Gebrauch ist nur auf ebenen Böden zulässig.
- Nässe vermeiden – Rutschgefahr !
- Bei Benutzung des Toilettenrollstuhls immer die Feststellbremsen betätigen.
- Beim Überwechsel in/aus dem Toilettenrollstuhl unbedingt die Fußstützen wegschwenken.
- Fußstützen niemals als Aufstehhilfe benutzen - Kippgefahr!
- Die Kippsicherheit des Toilettenrollstuhls ist deutlich geringer als bei Rollstühlen, vermeiden Sie deshalb seitliches Hinausbeugen – Kippgefahr!
- Vor unbefugter Benutzung, z.B. durch Kinder, durch Feststellen der Bremsen sichern.
- Der Toilettenrollstuhl TRS 200 XXL dient ausschließlich der Benutzung durch eine Person bis max. 200 kg auf dem Sitz und nicht als Transportmöglichkeit von Gegenständen (z.B. Leitern, Eimern o.ä.) !
- **ACHTUNG:** Beim Rückwärtsfahren über Schwellen mit dem beladenen Toilettenrollstuhl besteht die Gefahr dass sich die Arretierung der Armlehnen lösen können.

Wiedereinsatz

Dieses Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Bei der Aufbereitung sind die Vorgaben des Herstellers zu beachten und werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Beschreibung der Teile



- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Schiebegriff | 7. Doppelfunktions-Feststellbremse |
| 2. Rückenlehne | 8. Armlehne |
| 3. Sitzbrille | 9. Fußstütze |
| 4. Befestigungsclip Rückenlehne | 10. Fußstützenverriegelung |
| 5. Toiletteneimer mit Deckel | 11. Fersenband |
| 6. Armlehnenverriegelung | |

Montage

Der Toilettenrollstuhl wird in vormontierten Baugruppen geliefert. (Bild 1)

Die Montage erfordert keine spezielle Vorkenntnisse und ist fast ohne Werkzeug montierbar.

Stecken Sie die vormontierte Rückeneinheit auf das Grundgestell und sichern sie mit den Befestigungsclips. (Bild 2)

Ver- und Entriegeln der Armstützen

Ziehen Sie beide Armlehnen nach oben bis diese **hörbar** einrasten.

Das Einrasten erfolgt automatisch. Vergewissern Sie sich, dass die Einrastung beidseitig erfolgreich ist, hierbei muss der Arretierstift (1) sichtbar sein. (Bild 3)

Zum Entriegeln der Armstützen Arretierknopf nach hinten ziehen (2) und Armlehne nach unten abschwenken. (Bild 3)

ACHTUNG: Es kann sein, dass durch den Transport die Aufnahme der Rückenlehne etwas verbogen ist, diese kann leicht nachgebogen werden bis der Arretierknopf vorn richtig einrastet.

Doppelfunktions-Feststellbremse



Zum Feststellen der Bremse Hebel nach unten drücken. Gleichzeitig wird die Richtungsstellung des Rades blockiert. (Bild 4) Zum Entriegeln den kleinen Hebel oben mit dem Schuh nach vorn drücken (Bild 5).

Fußstützen anbringen

Hängen Sie die mitgelieferten Fußstützen mit den beiden Bohrungen wie gezeigt an den jeweiligen Haltebolzen ein. (Bild 6-7)

Fußstützen ver- und entriegeln

Zum Verriegeln der Fußstützen diese zur Mitte hin schwenken bis diese hörbar einrasten. Zum Entriegeln Hebel wie gezeigt nach innen drücken und Fußstützen seitlich anlegen. (Bild 8)

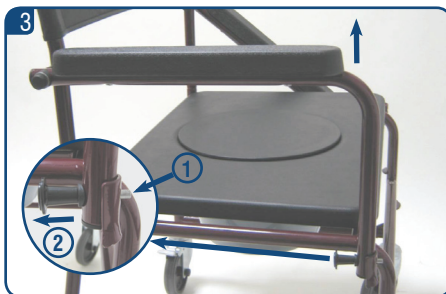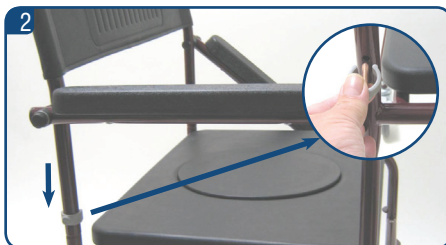

Höheneinstellung der Fußstützen

Um die Fußstützen in der Höhe zu verstellen lösen Sie zuerst die Klemmschraube mit einem passenden Schraubenschlüssel (13 mm). Nach Verschieben können die Fußstützen stufenlos in der Länge verstellt werden für Unterschenkel-längen von 420 – 570 mm. Klemmschrauben wieder fest anziehen. (Bild 9)

ACHTUNG: Fußstützen niemals als Aufstehhilfe verwenden!



Toiletteneimer

Toiletteneimer (auch mit aufgesetztem Deckel) stets von oben einhängen und entnehmen. Der Toiletteneimer rastet ein, die Sitzbrille kann zum Reinigen einfach nach oben geklappt werden. (Bild 10)



Reinigung/Desinfektion/Wartung

- Von Hand mit einem feuchten Tuch und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln regelmäßig reinigen!
- Zur Desinfektion kann ein Sprühdesinfektionsmittel verwendet werden, z.B. Descocept AF oder Bacillol AF.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden!
- Schrauben am TRS 200 XL regelmäßig kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen!

Garantie

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

Irrtum und Änderungen aufgrund von technischen Verbesserungen und Designveränderungen vorbehalten.

Typenschild



- 1 Produktname
- 2 Artikelnummer
- 3 Herstelldatum und Seriennummer
- 4 Gebrauchsanweisung beachten!

Technische Daten

Gesamtbreite	72 cm
Länge ohne Fußstützen	62 cm
Länge mit Fußstützen	88 cm
Höhe Schiebegriff	98 cm
Rückenwinkel	9°
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	52 cm
Sitzbreite	56 cm
Verstellung Fußstütze	42 - 57 cm
Lenkrollen Durchmesser	12,5 cm
Gewicht	15,3 kg
Max. Belastung	200 kg
Materialien: Rahmen: Geschweißtes Stahlrohr, pulverbeschichtet / Sitzbrille und Armauflage: PU (Polyurethan)	

TRS 200 XXL

WHEELED DROP-ARM COMMODE

CE



Foreword

Dear users,
we congratulate on the buying of a technically matured and the best available technology product.

This instructions helps you and the carers as a basis for sure, safe use of the toilet wheel chair and a sensitive use of the product's possibilities.

The instructions describes the preparation, service, use, servicing and cleaning of the product.

This instructions is to be perused carefully and must be always accessible to all users of the product.

Scope of derlivery contents

1. Wheeled Drop-Arm commode
2. Bucket with lid
3. User Manual

Indication

Toilet wheel chairs are necessary when using or achievement of the toilet is not possible because of a handicap. Toilet wheel chairs are also usable as room wheel chairs. Toilet wheel chairs can be pushed over customary toilet bowls, up to a height of 41 cm.

Safety instructions

- Read this instructions carefully.
- Before use all components are to be checked for damages and firm seat.
- While seating, rising and while inserting the toilet bucket as well as folding up or engaging the armrests it`s possible to pinch clothing or body parts
- The use is allowed only on level grounds
- Avoid moisture – Slide danger !
- With use of the toilet wheel chair always operate the full stop brake
- Before getting in / from the toilet wheel chair swing away the footrests
- Footrests never use as stand up device - Tilting danger !
- The steadiness of the toilet wheel chair is clearly lower as with wheel chairs, therefore avoid lateral lean out – Tilting danger !
- Protect from unauthorized use, e.g., by children, by locking the brakes
- The toilet wheel chair TRS 200 XXL serves excluding the use of a person to max. 200 kg on the seat and not as a transport possibility of objects (e.g., to ladders, buckets or similar)!

ATTENTION: While driving reverse across door sills with the loaded commode chair it causes the risk that the interlock of the armrests get opened.

Part of the Wheeled Commode



- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Push handle | 7. Double function full stop brake |
| 2. Backrest | 8. Armrest |
| 3. Toilet seat | 9. Footrest |
| 4. Fixation clip backrest | 10. Footrest interlock |
| 5. Bucket with lid | 11. Heel tape |
| 6. Armrest interlock | |

Assembly

The commode is supplied in pre-assembled modules. (Picture 1)

The installation of the Wheeled Drop-Arm commode requires no special knowledge and is mountable nearly without tools.

Put the premounted backrest on the basic rack and protect with the fixation clips for backrest. (Picture 2)

Inter- and unlock of armrest

Pull both armrests upwards until they audible engage the interlock.

The interlock occurs automatically. Make sure that the interlock is successful on both sides, on this occasion, the locking pin (1) must be visible. (Picture 3)

In order to unlock the armrests move the locking button to the back (2) and swing the armrest downwards. (Picture 3)

ATTENTION: It may be possible that the armrest is a little bit bent during transport, this can be postbent easily until the locking button in front properly locks.

Double function Full stop brake

To interlock the brake press lever downwards. This will lock the direction of the wheel in place (Picture 4). To unlock press the small lever at the top forward with the shoe (Picture 5).




Fitting footrest

Hang up the provided footrests with both drillings as shown in the respective hold pins. (Picture 6-7)

Interlock and unlock footrest

In order to interlock the footrests turn them to the middle until its audible engage.

In order to unlock press the lever as shown inwards. (Picture 8)

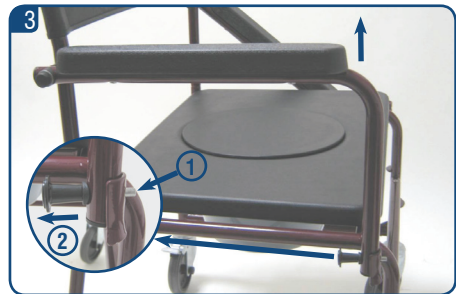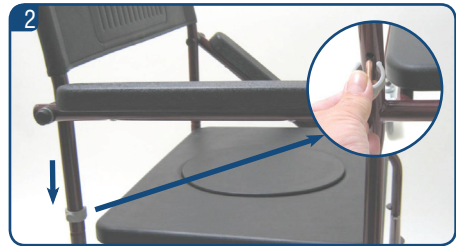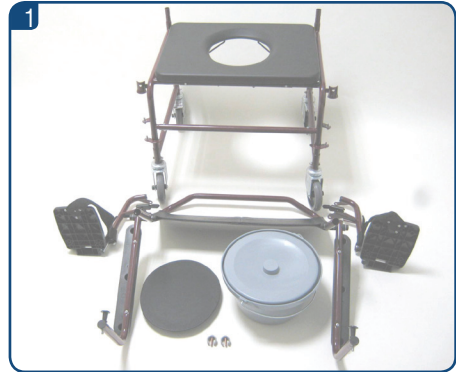

Height Adjustment of footrest

To adjust the footrests in the height first unlock the nut (wrench 13mm). Then the footrests can be shifted stepless in the height for leg lengths from 420 – 570 mm. (Picture 9)

ATTENTION: Never use the foot rest as stand up device !

Bucket

Insert or remove the toilet bucket (also with put on lid) always from the top. The toilet bucket engages, the toilet seat can be opened simply upwards for cleaning. (Picture 10)

Cleaning/Disinfection/Maintenance

- Clean regularly by hand with a damp cloth and usual household cleaning agents!
- Use spraying disinfectants p.e. Descosept AF or Bacillol AF.
- Do not use any aggressive detergents!
- Screws of TRS 200 XL must be checked regularly and if necessary retightened.

Technical Data



- 1 Product name
- 2 Article number
- 3 Date of Production and serial number
- 4 Attention: See operating instructions!

Warranty

We issue a warranty of 24 months from date of purchase.
Subject to technical alterations.
Errors and omissions excepted.



Technical Data

Width	72 cm
Length w/o footrest	62 cm
Length w/i footrest	88 cm
Height push handle	98 cm
Height of backrest	42 cm
Angle of backrest	9°
Depth of seat	42 cm
Height of seat	52 cm
Width of seat	56 cm
Adjustment of footrest	42 - 57 cm
Wheels diameter	12,5 cm
Weight	15,3 kg
Max. loads	200 kg
Materials: Frame: Welded steel Tube, powder coated. Toilette seat and armrest: PU (Polyurethane)	

Ihr Fachhändler / Your specialist Dealer:

